

Max: 135 kg/297 lbs

Ovaalia EasyGlide liukulautaa käytetään makuuasennossa tapahtuviin siirtoihin. Tällaisia siirtoja ovat mm. siirrot sängystä toiseen, sängystä leikkauspöydälle tai röntgenlaitteeseen tai sängystä suihkuvaunuun. Siirtoihin tarvitaan kaksi avustajaa. Turvallisuuden vuoksi, siirtoon liittyvien tasojen tulee olla vakaita ja luotettavia.

Ovaali EasyGlide liukulauta on osa siirtämisen apuvälineiden tuoteperhettä. Liukulaudan mallin ja materiaalin valintaan vaikuttavat potilaan toimintakyky ja tilanteet, joissa tuotetta käytetään.



Toiminnan tarkastus

Silmämääräinen tarkastus

Tarkasta tuotteen kunto ja toiminta säännöllisesti. Tuote tulee tarkastaa joka pesukerran jälkeen. Tarkasta, että tuotteen kangas ei ole kulunut, vahingoittunut tai haalistunut. Mikäli tuotteesta on havaittavissa kulumista, se tulee poistaa käytöstä.



Lue aina käyttöohje


Lue aina kaikkien siirtämistuotteiden käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa.

Opettele käyttämään tuotetta huolella käytännön tilanteissa.

Älä jätä potilasta yksin siirtojen aikana.



Toiminnan tarkastus

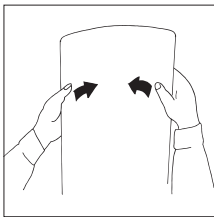


Taivuta ovaalia EasyGlide liukulautaa varovasti testataksesi sen kestävyyttä ja joustavuutta. Laudan tulee olla sekä joustava että jäykkä. Poista liukulauta käytöstä, mikäli sen joustavuus on heikentynyt.

Turvallisuus



EasyGliden molemmilla puolilla olevien tasojen on oltava tukevia, kun potilasta siirretään sängyn ja laverin välillä. Maksimikuormitus 135 kg pätee, kun siirtoetäisyys on enintään 5 cm.

Paikalleen laittaminen

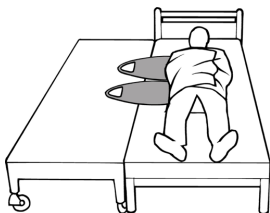


Ovaali EasyGlide liukulauta asetetaan potilaan lantion ja hartioiden alle. Potilas käännetään kyljelle esim. liukulakanan avulla. Laita ovaali EasyGlide liukulauta potilaan alle, vuoteen oman lakanan ja liukulakanan väliin. Paina liukulautaa patjaa vasten ja työnnä se paikoilleen.

Varmista, että potilas on liukulautojen päällä siten, että liukulaudan kahvat näkyvät vartalon kummaltakin puolelta.


HUOMIO! Mikäli siirron aikana käytetään kahta tai useampaa liukulautaa, varmista ettei potilaan iho jää puristuksiin lautojen reunojen väliin.

Siirto sängystä sänkyyn

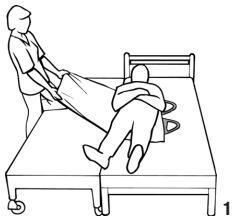

1

1. Potilaan siirto liukulautojen päälle: Laita liukulaudat siten, että ne ovat molempien siirtotasojen päällä. Avustajan on hyvä käyttää apuna liukulakanaa. Varmista vielä, että liukulaudat ovat kummankin siirtotason päällä eikä tasojen etäisyys toisistaan ole yli 5 cm. Kallista potilasta liukulautoja kohti ja vedä liukulakanaa siirtääksesi potilas.

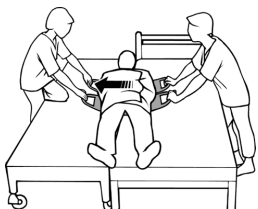


2

2. Siirto voidaan suorittaa myös siten, että avustajat vetävät kummastakin liukulaudasta. Liukulaudat asetetaan siten, että liukulaudan kahvat näkyvät potilaan vartalon kummaltakin puolelta.

Toinen avustaja vetää liukulautoista samanaikaisesti, kun toinen avustaja työntää liukulautoja toisesta reunasta.

Siirtyminen sängyn päätä kohti

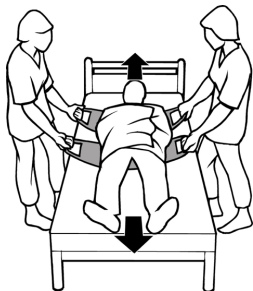

Potilaan siirtäminen kohti sängyn päätä käyttäen apuna kahta liukulautaa: Liukulaudat asetetaan potilaan lantion ja hartioiden alle. Avustajat asettuvat käyntiasentoon kummallekin puolelle sänkyä, tarttuvat liukulaudan kahvoista kiinni ja ottavat askeleen kohti sängyn päätä.

Liukulaudan pois ottaminen

Liukulautu otetaan pois potilaan alta siten, että avustaja vetää liukulautaa kahvasta sängyn reunaa kohti. Avustajan on hyvä pitää potilaasta kiinni liukulaudan pois ottamisen aikana, ettei potilas siirry liukulaudan mukana.

Materiaali:

Polyeteeni

Tuotteen hoito:

Puhdista EasyGlide liukulautu vedellä ja desinfiointiaineella.

Mikäli haluat kysyä jotain tuotteesta, ota yhteyttä valtuutettuun RoMedic jälleenmyyjään (Respecta Oy). Tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi sinulla tulee aina olla päivitetty versio käyttöohjeesta. Uusimman käyttöohjeen saat valtuutetulta jälleenmyyjältä (Respecta Oy). Käyttöohjeen voi ladata osoitteesta www.romedic.com

RoMedic AB

Veddestav. 15, Box 640 Tel: +46 (0)8-594 773 33

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group