


# Istuintyyny EvoFlair

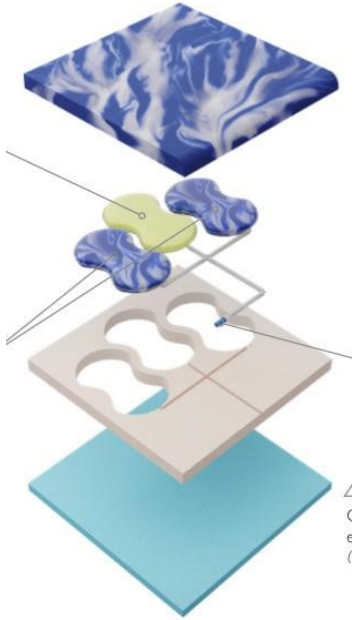

## Istuintyyny EvoFlair 476C00-SK14

EvoFlair istuintyyny tarjoaa hyvän tuen istuma-asennolle henkilöille, joilla on erittäin suuri riski saada painehaavauma. Kevyessä istuintyynyssä yhdistyvät ilman erinomainen kyky tasata painetta ja GelTouch vaahdon viilentävä, hikoilua ehkäisevä ominaisuus, joten tyyny sopii erityisen hyvin käyttäjälle, jotka toimivat aktiivisesti pyörätuolista käsin tai istuvat tuolissa pitkiä aikoja. Voit tutustua tyynyn ominaisuuksiin tämän videon avulla: Istuintyyny EvoFlair EvoFlair istuintyynyssä on 3-kerrosrakente. Pohjan vaahdotuovikerros tuo tukevuutta istuma-asennolle. Välikerroksessa on kolme ilmakennoa, jotka vähentävät ja tasaavat istuinkyhmyjen alueelle kohdistuvaa painetta. Päälimmäinen kerros on GelTouch vaahtoa, joka tuntuu viileältä ja vähentää hikoilua. Myös tyynyn päällinen on valmistettu hengittäväästä Mesh-kankaasta. Päällisen sisään on ommeltu nesteitä hylkivä pinnoite. EvoFlair tyynyä on helppo käyttää, ilmakennojen täyttöön ei tarvita erillistä pumppua. Tyynyn etureunan venttiili avataan vetämällä ja ilmakennojen annetaan täyttyä 30 sekunnin ajan. Tämän jälkeen venttiili suljetaan. Tyynyn käyttäjä istuu tuuntyynille, avaa venttiiliin ja päästää ilmaa ulos kennoista. Ilmakennoissa on sopivasti ilmaa, kun sormet mahtuvat kevyesti liu'uttamalla istuinkyhmyin ja tyynyn väliin. Tyynyn yksinkertainen venttiilirakenne ehkäisee tyynyn toimintahäiriöitä. EvoFlair istuintyynyn ominaisuudet: Sopii käyttäjälle, jolla on erittäin suuri riski saada painehaavauma Paineen kevennys- ja tasaus ilmakennojen avulla Lämmönsäätely GelTouch vaahdon ansiosta Istuinlevyydet 38-52cm ja istuinsyvyudet 40-52 cm Istuintyynyn painoraja 0-200 kg Päällinen konepestävä 60 °C, vetoketju 3 sivulla

### Paino (kg)

1,10

### Valmistaja:

Ottobock

### Pesuohjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 60°C. Hellävarainen linkous (kts. pesukoneen käyttöohje). Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana.

Tuotekoodi	Mitat	Tuotekoodi	Mitat
476C00-SK1480	38x40x8cm	476C00-SK1490	45x44x8cm
476C00-SK1481	40x40x8cm	476C00-SK1491	45x46x8cm
476C00-SK1482	40x42x8cm	476C00-SK1492	46x51x8cm
476C00-SK1483	41x46x8cm	476C00-SK1493	48x42x8cm
476C00-SK1484	42x40x8cm	476C00-SK1494	48x44x8cm
476C00-SK1485	42x42x8cm	476C00-SK1495	48x46x8cm
476C00-SK1486	42x45x8cm	476C00-SK1496	50x42x8cm
476c00-SK1487	42x46x8cm	476C00-SK1497	51x44x8cm
476C00-SK1488	42x52x8cm	476C00-SK1498	51x46x8cm
476C00-SK1489	45x42x8cm	476C00-SK1499	52x52x8cm